

L'assistance électrique puissante pour pousser ou freiner le fauteuil roulant

La mobilité dans une autre dimension

v-max⁺

www.aat-online.de


Promener des personnes bariatriques est particulièrement difficile pour la personne accompagnante. La personne accompagnante est rapidement limitée dans les déplacements avec le fauteuil roulant.

Le v-max⁺ offre une solution appropriée. Il pousse dans les montées et freine dans les descentes. La personne accompagnante doit seulement diriger le fauteuil sans faire d'efforts. De longues promenades sont ainsi possibles.

Le poids maximal (patient, fauteuil, v-max⁺) est de 300 kg. Le montage est possible sur des fauteuils ayant une largeur d'assise entre 60 et 85 cm. Le v-max⁺ est monté à l'arrière du fauteuil et ne gêne pas la personne accompagnante pendant la marche.



Accessoires

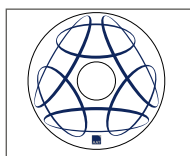

rotège rayons



anti bascule



transformateur

Données techniques

fly_v-max_plus_d_05_13

charge maximale	300 kg ⁽¹⁾ (patient, fauteuil, v-max ⁺)
montage	largeur d'assise de 60 cm à 80 cm
vitesse	réglable
avant / arrière	5,5 km/h 3 km/h
autonomie	jusque 11,5 km ⁽²⁾
pente maximale	12% ⁽²⁾
hauteur largeur profondeur	27,5 61,5 18,5 cm
batteries	2 x 12V / 22 Ah
moteur	24V
poids batteries	15,0 kg
poids moteur	13,5 kg

1 Veuillez respecter le poids maximal du fauteuil roulant

2 L'autonomie dépend du poids de la personne transportée et de l'état de la route empruntée.



Ideen bewegen mehr

Euromove France SASU
10, rue Jean Jacques Rousseau
F-87350 Panazol
Tél: +33 972 663 124
contact@euromove.fr
www.euromove.fr

Euromove SRL/BV
3, Rue Abbé Cuypers
B-1040 Brussels
Tel. : +32 2 358 59 86
info@euromove.be
www.euromove.be